

# EVAGYNAL<sup>®</sup>

Isotone oplossing voor gynaecologisch gebruik, pH 4,0

Vaginale  
oplossing



## Samenstelling

Polyhexamethyleen biguanide hydrochloride (PHMB)	0,10
Natriumedetaat	0,10
Glycerol	2,00
Hydroxyethylcellulose	0,60
Kaliumchloride	0,15
Melkzuur	0,20
Gezuiverd water	qb tot 100 ml

## Categorie

Medisch hulpmiddel CE

## Werking

EVAGYNAL<sup>™</sup> helpt de normale fysiologische gesteldheid van de vagina te herstellen gedurende de behandeling van vaginale aandoeningen of na een medische ingreep. Het product is geconserveerd met polyhexanide (PHMB), een kationisch surfactant dat zeer goed wordt verdragen door alle slijmvliezen. Polyhexanide is een polymeer dat is opgebouwd uit monomeren die een biguanidegroep bevatten.

Door het gebruik van EVAGYNAL<sup>™</sup> wordt het herstel van de normale lichaamsfuncties bevorderd, ook gedurende traumatische behandelingen zoals farmacologische of medische.

## Farmaceutische vorm

Oplossing in flacon van 100 ml.

## Medische informatie

### Toepassing

Hulpstof bij de behandeling van ontstekingen van de vulva, vagina en de baarmoederhals, ongeacht aard en oorzaak. Na medische ingrepen (diathermische coagulatie, lasertherapie, cryotherapie) in combinatie met wondbehandeling.

### Contra-indicaties

Vastgestelde overgevoeligheid voor de bestanddelen. Tijdens de zwangerschap mag het product alleen worden gebruikt indien strikt noodzakelijk en onder medische begeleiding.

### Bijwerkingen

In sommige gevallen kan een overgevoeligheid (branderigheid of irritatie) optreden, wat verder geen gevolgen heeft en waarvoor de behandeling niet hoeft te worden aangepast; patiënten dienen echter melding te maken bij arts en apotheker van elke ongewenste bijwerking die vermoedelijk wordt veroorzaakt door het product.

### Incompatibiliteit

Geen

## Beïnvloeding van de rijvaardigheid of het bedienen van machines

Er zijn geen aanwijzingen dat het product de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen beïnvloedt.


## Dosering en wijze van toedienen

Doorgaans is eenmaal toedienen voldoende.

De behandeling kan op advies van een arts eventueel na 4 dagen worden herhaald.

## Gebruiksaanwijzing

1. Houd de flacon met het schuine platte gedeelte van het garantiedopje, boven op de flacon, naar u toe.  
Druk het platte deel van garantiedopje van u af, totdat het breekt.
2. Neem de steriele canule uit het beschermende omhulsel en steek hem in de flacon totdat hij stevig blijft zitten;
3. Neem een geschikte liggende of zittende houding aan.
4. Breng de canule voorzichtig in de vagina,  
tot halverwege het uiteinde van de canule;
5. Knijp de flacon helemaal leeg. Houd de vloeistof enkele minuten in de vagina, zodat de oplossing haar werking kan doen.  
Volg ook eventuele instructies van uw behandelend arts op.

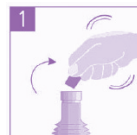

## Waarschuwingen

(Met name langdurig) gebruik van producten die plaatselijk worden toegepast kan leiden tot overgevoeligheid. In dat geval moet u de behandeling staken en contact opnemen met uw arts voor een passende behandeling. Het product mag alleen vaginaal worden toegediend.

Er zijn geen schadelijke effecten gerapporteerd bij overdosering, mits het product onder normale condities wordt gebruikt. Het product niet gebruiken wanneer u overgevoelig bent voor een of meerdere bestanddelen. Het product niet gebruiken na het verstrijken van de houdbaarheidsdatum die op de verpakking is aangegeven. Het product niet gebruiken als de verpakking niet intact is. Buiten bereik van kinderen houden. Niet inslikken.

## Speciale bewaarvoorschriften

Bewaren bij kamertemperatuur. Verwijderd houden van warmte en licht.

## Verpakking

1 flacon van 100 ml met canule.

Z-Index: 15792005

Artikelnr. 688.13001

Medisch hulpmiddel CE



Distributeur:

Memidis Pharma b.v.

Mr. Van Coothlaan 4

6602 GT Wijchen, Nederland



Fabrikant:

Lo.Li. Pharma srl

Via Orgosolo 27 int 1

00132 Rome, Italië

